

The world's true measure of color

HunterLab

ColorFlex[®] EZ



私たちの
目に見える
色を
測定



測色対象物

コーヒー
パウダー

顆粒
砂糖

ペレット

液体洗剤 樹脂
顔料

ラミネート
ソース

グラウト材
スープ
香辛料

膜
セメントと
コンクリート
ヨーグルト
ジュース

パネルと
ブラーク
接着剤

着色剤
すべての粉末薬品

乳製品
塗装パネル

フルーツ
チーズ

粉末
塗装膜

ナッツ
石鹼

固体

顧客が見る色を測色

HunterLabの次世代の分光測色計、ColorFlex® EZ は究極の測色精度を達成する 45°/0°デザインを採用し、最高レベルの色品質管理を提供します。多用途、シンプルさ、パフォーマンスを組み合わせた ColorFlex® EZ は世界で最も信頼された測色エキスパートの

60年以上の測色イノベーションを

簡単に使用できるコンパクトな計測装置に結実しました。

45°/0° デザイン: 完璧さを追求した色品質

HunterLabの ColorFlex® EZ の45°/0° デザインは色を正しく測定するだけでなく、毎回完璧に測定します。人間の目が見るようにサンプルを測定できる唯一のデザインです。試験所で検査される色だけでなく、実際に顧客が見る色を測定します。

接続性の向上


3つのUSB2.0ポートにより様々な機器に接続し、より多くのオプションを提供します。

- USBフラッシュドライブで結果を他の機器やコンピュータに結果を転送
- キーボードでカスタムサンプルIDを手動で入力
- データ入力エラーなしでサンプルを迅速に認識するバーコードスキャナー
- サンプル測定結果を即座にプリントアウトするプリンター
- HunterLabの EasyMatch® QC software ソフトウェアオプションを使用してコンピュータでデータをプロット

シンプルな操作

全ての測色の課題に簡単な操作で対応：

- デスクのスペースを取らない **小型サイズ**
- **「ワンタッチ」操作**

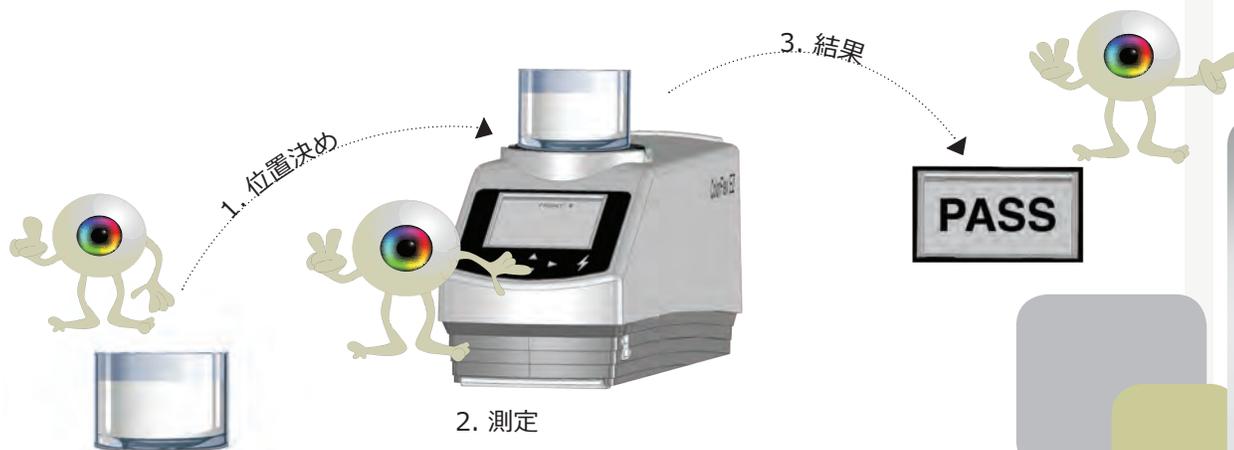

高度なパフォーマンス

高度なパフォーマンスと精度の高い結果を実現する機能:

- 不透明な固体、液体、粉末、顆粒、ペレットから半透明の固体や液体まで全てを測定する多才なサンプル測定能力
- 設定や標準値を1台の装置から他の装置に簡単に転送。USBフラッシュドライブにバックアップをダウンロード
- **250**種類の設定、製品標準、色差を保存する

拡大されたサンプルストレージ

2000 件のサンプル測定値を保存



優れた柔軟性

250種類の設定、以下の広範囲なパラメーターの製品標準値と色差を含む内蔵ソフトウェア:

- データ報告条件を指定する色空間、指数、イルミナント、観測者
- 製品標準や色比較の目標を定める標準値
- 製品仕様に対する合否公差
- 不均一または不揃いなサンプルの測定精度を高める平均化
- カラーデータや色差データ、スペクトル差など測定データを複数の方法で報告する表示フォーマット
- バリエティ豊富なサンプル取扱いアクセサリ

ColorFlex® EZ Tomato も
ご利用頂けます

HunterLabのアドバンテージ

ColorFlex® EZ は世界で最も信頼される測色エキスパート、HunterLabの60年以上の品質、革新、経験に裏付けられています。


あらゆる課題にも適切なソリューションをお届けしてきたHunterLabだからこそ、あらゆる測色ニーズや予算に製品とテクノロジーを適合させ、業界をリードする最も広範な測色ソリューションを提供します。

It's that easy!
ColorFlex® EZ



詳しい情報はwww.hunterlab.com/jpをご覧ください。

またはお近くのHunterLab代理店にお問い合わせください。

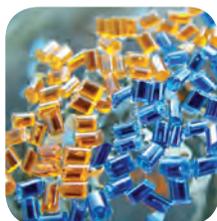

アクセサリ



04-4000-00

サンプルカップ用不透明カバー

サンプルカップに外部からの光が差し込むことを防ぐ光トラップ。

04-7209-00

ガラス製サンプルカップ:64 mm (2.5 in)

液体、粉末、顆粒、ペレットサンプル測定用の光学的に透明なガラスカップ。

02-4579-00

リングとディスクセット

液体、粉末、顆粒、ペレットサンプル測定用ガラス製サンプルカップに使用。



04-6622-00

サンプルカップ用ポートインサート

64 mm (2.5 in) 粉末、顆粒、ペレット、ペースト、液体を正確に測定するためにガラス製カップを位置決めし、固定します。

04-6623-10

32 mm (1.25 in) ポートインサート

04-6623-09

25 mm (1 in) ポートインサート

04-6623-08

19 mm (0.75 in) ポートインサート

04-6623-05

13 mm (0.50 in) ポートインサート

サンプル測定部を調整します。



A13-1014-294

USB フレキシブルキーボード

88文字のキーボードでIDを直接ColorFlex® EZに入力します。

A13-1014-254

USB バーコードリーダー

バーコードスキャナーで製品IDを直接ColorFlex® EZに取り入れます。USBポートで自動的に検出されます。

A13-1014-259

USB プリンター

USBプリンターで測定結果を紙に印刷できます。別売りの標準のUSBケーブルが必要です。別売りのサーマルプリンタ用感熱紙を使用してください。



L02-1014-608

ハードキャリーケース、ColorFlex® EZ

ColorFlex® EZ 用のハードキャリーケース。

- その他のアクセサリとサンプル取扱い付属品もご利用いただけます。
詳しい情報は: www.hunterlab.com/jpをご覧ください

本内容は通知されることなく変更することがあります。